

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ELEGANTE 882 СКРАБ ЗА КОЖА + DARSONVAL

Модел 862 HF/M-882




Вносител

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl Rev.
A/09/2024



Технически данни:

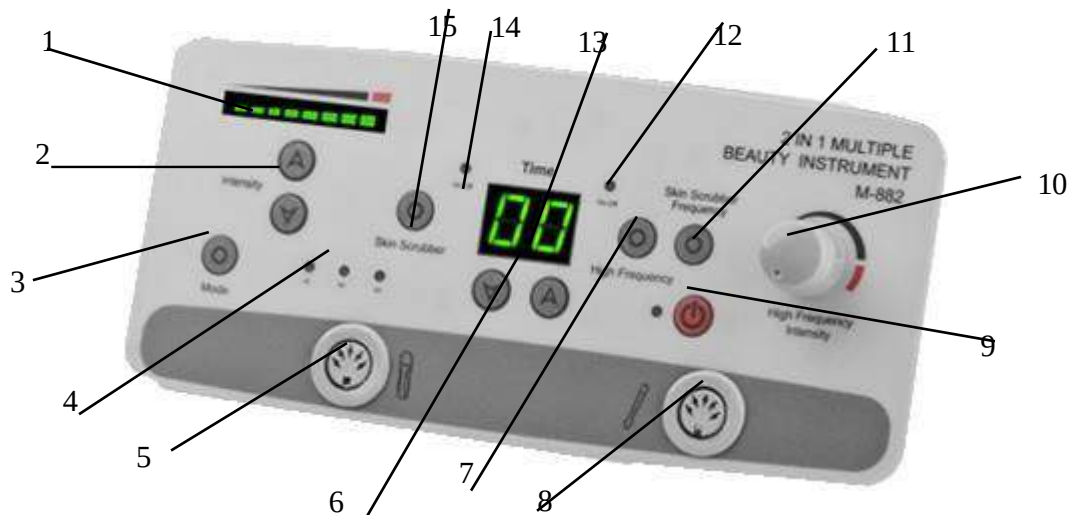

1. Индикатор за интензивност
2. Регулиране на интензивността
3. Избор на вариант на лечение за кавитационен пилинг (M1- кавитационен пилинг, M2- сонофореза, M3- сонофореза с микромасаж.
4. Работна светлина за съответната опция за лечение с кавитационен пилинг,
5. Свързване на кавитационния пилинг,
6. Регулиране на времето за работа,
7. Избор на вариант за лечение - дарсонвал,
8. Свързване на дарсонвал,
9. Стартиране/спиране на дарсонвал/кавитационен пилинг,
10. Регулиране на интензивността на дарсонвала,
11. Регулиране на мощността на шпатулата за кавитационен пилинг
12. Светлина за работа с дарсонвал
13. Индикация на времето
14. Светлина за кавитационен пилинг,
15. Избор на опция за лечение - кавитационен пилинг

DARSONWAL

Токовете на Д'Арсонвал са една от разновидностите на високочестотните токове. Устройството произвежда озон чрез електростатични разряди, възникващи в пелетите.

Действието на токовете на д'Арсонвал се основава главно на въздействието върху кръвоносните съдове и вегетативните нервни окончания. Искренето, което възниква между електрода и кожата, предизвиква разширяване на кръвоносните съдове и въздейства върху подкожната тъкан. Образуваният озон има дезинфекциращ ефект. В устройството има избор от 3 гранули. Лечението се извършва в продължение на 5 до 7 минути.

ПОКАЗАНИЯ:

- Кожни сетивни нарушения,
- алопеция ареата,
- Стимулиране на кръвоносната система,
- Дезинфекция на кожата,

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Бременност
- Хипертония
- Оток
- Нервна хиперактивност
- Сърдечни заболявания
- Възпалителни състояния на кожата
- Треска
- Астма

- Епилепсия
- Метални импланти
- Розацея
- Разширени кръвоносни съдове
- Алергични състояния на кожата

Инструкции за употреба

1. Свържете дръжката от дарсонвала към вход № 8.
2. Задайте времето за обработка с бутон 6.
3. Натиснете бутон 7, светва лампата за готовност на дарсонвала (12).
4. Настройте интензивността на лечението с копчето (10).
5. Натиснете бутон 9, за да започнете обработката.

Кавитационният пилинг е преди всичко безболезнено почистване на кожата с помощта на ултразвукови вибрации. Той дава възможност за цялостно отстраняване на излишния себум от порите и космените фоликули, както и за премахване на черните точки.

При използването на пилинга се осъществява явлението кавитация, което се получава при контакт на ултразвук с течност, след което се образуват микроскопични газови мехурчета и се извършват редица химични процеси, в резултат на които се разграждат мъртвите клетки на роговия слой.

ПОКАЗАНИЯ

- Повдигане на лицевия овал и брадичката,
- стягане на структурата на кожата,
- изглаждане на повърхностни бръчки,
- Намаляване на торбичките под очите и "крачетата на враните",
- възстановяване на колагена,
- Терапия против стареене - превенция,
- Намаляване на замърсяванията и разширените пори,
- Укрепване на структурата на кожата.
- Пречистване на кожата.

Инструкции за употреба

1. Свържете шпатулата за кавитационен пилинг към вход 5,
2. Изберете времето за третиране с помощта на бутон 6,
3. Изберете вида на лечението с бутон 3,
4. Изберете интензивността на лечението с бутон 2 (на дисплея ще се появи индикатор за интензивност 1.),
5. Натиснете бутон 15, след което лампата за готовност за кавитационен пилинг (14) светва,
6. Натиснете бутон 9, за да стартирате обработката.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не попадат течности.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o., в следните случаи:
(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, (в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности, се свържете с ап оторизиран сервизен център, за да избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и след това да се предава в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Ето защо те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.