

ACTIVESHOP[®]

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Електрически козметичен стол Sillon Classic с 4 мотора и люлка

Модел: C501A



Вносител:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



***ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА*.**


Това ръководство съдържа подробна информация за експлоатацията и поддръжката на устройството. Преди да използвате устройството, прочетете приложената инструкция. Използвайте уреда по описания начин. Съхранявайте това ръководство и се уверете, че всички лица, които могат да използват уреда, са запознати с него.

Електрическият козметичен стол Sillon е професионално оборудване, което е идеално за всеки салон за красота. Той е идеален за масажи, козметични и физиотерапевтични процедури. Фотьойлът е проектиран така, че да осигурява пълен комфорт, когато лежите върху него по време на лечение. Креслото се състои от четири части и подвижна възглавница. От двете страни на седалката има дръжки, на които може да се закачи дистанционното управление, за да е винаги под ръка.

Товароносимост на продукта: 150 kg


Максималната товароносимост на корпуса на седалката е 150 kg. Не повдигайте повече от посоченото тегло, което седалката може да издържи.

Не скачайте върху облегалката и не оказвайте голям натиск върху подлакътниците, за да не повредите конструкцията на продукта.

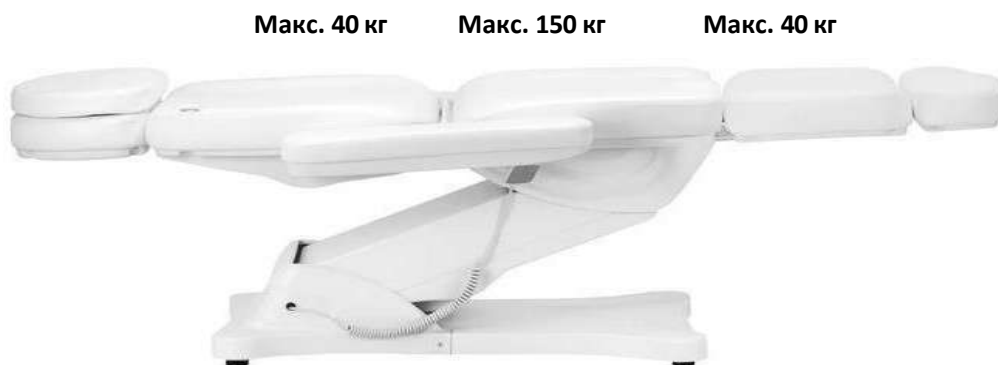

Забележка

За опаковане се използват картон и външни кашони с общо 10 слоя хартия, за да се гарантира защитата на вашите продукти. Препоръчваме ви да запазите оригиналната опаковка за бъдеща употреба, особено при връщане по време на гаранционния период. От съображения за безопасност са необходими двама души, за да повдигнат стола от картонената кутия. При вдигането застанете от двете страни на облегалката за глава и подложката за крака на стола. Запомнете, че столът може да се повдига само от позициите на облегалката за глава и подложката за крака, но не и от двете страни на подлакътниците.

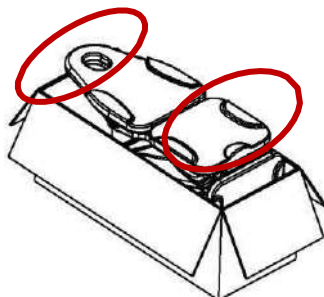

Преди да използвате стола, проверете дали опаковката е непокътната и дали не е била повредена при транспортирането. Ако има някакъв проблем, моля, уведомете транспортната фирма или персонала за следпродажбено обслужване в рамките на 2 дни от получаването на устройството. Уверете се, че всички аксесоари са окомплектовани в момента на доставката. Ако установите, че по време на доставката липсват аксесоари, моля, свържете се своевременно с персонала за следпродажбено обслужване.


Електрическият козметичен стол трябва да се използва в затворено и сухо помещение. Температурата в помещението трябва да бъде между $+10^{\circ}$ и -40° , а относителната влажност на въздуха - между 30% и 75%. Ако електрическият козметичен стол е бил изложен на температури под 0° , изчакайте поне 5 часа, преди да го използвате, за да има време устройството да достигне стайна температура.

Преди да използвате електрическия козметичен стол, прочетете инструкциите и изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени.
2. Уверете се, че столът е в изправност.
3. Поставете електрическия козметичен стол на мястото, където ще се използва.
4. Включете щепсела на електрическата мрежа в подходящ контакт.

Съвет! Деца и неопитни лица не трябва да използват този уред. Децата трябва да бъдат под наблюдение и не трябва да играят в близост до електрическия козметичен стол. От съображения за безопасност изключете уреда от електрическата мрежа и не го оставяйте без надзор. Изключете и захранващия кабел от електрическата мрежа.

Размери на уреда:

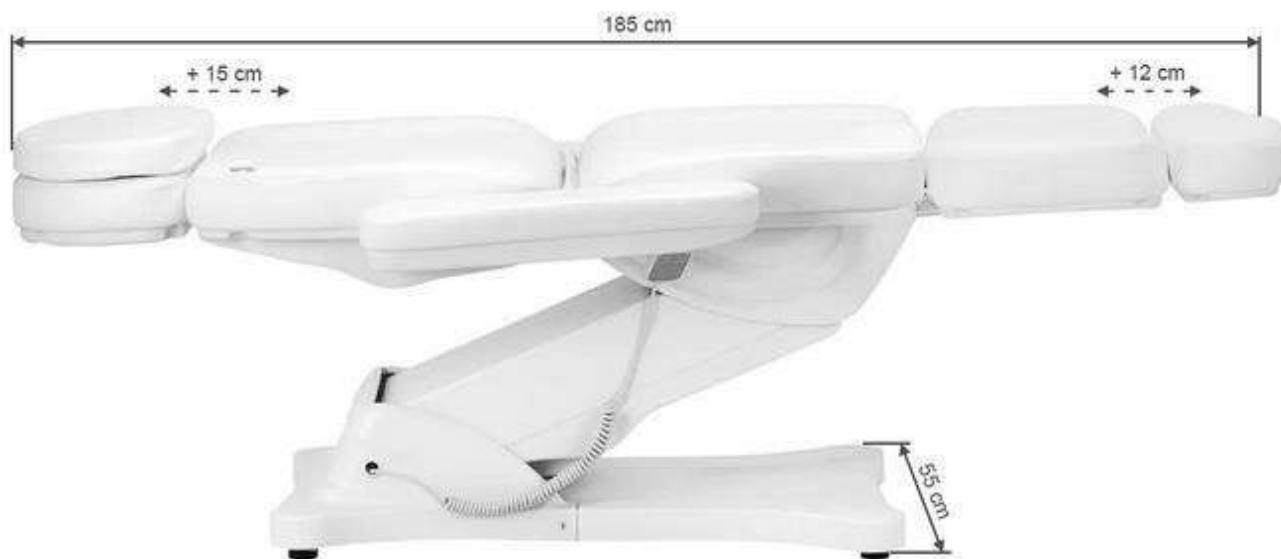



Конструкция на уреда:

Възглавница

Облегалката за глава

Облегалката

Подлакътник

Седалка

Подложка за крака

Задвижващ механизъм за повдигане

Пластмасова основа



Предупреждение

1. Подложката за крака не е проектирана да издържа пълното тегло на възрастен човек.
2. Не сядайте директно върху подлакътника и поставката за крака.
3. Не използвайте електрическия стол за гинекологичен преглед в близост до запалими газове.
4. Не вдигайте по-голямо тегло, отколкото столът може да издържи.
5. Уверете се, че разстоянието между контактите не надвишава 2 метра.

Предупреждение

1. От съображения за безопасност винаги включвайте захранващия кабел в заземен контакт.
2. Не връзвайте захранващия кабел към уреда. Вдигането или дърпането на захранващия кабел може да го повреди. Уверете се, че захранващият кабел може лесно да бъде изваден в случай на авария.
3. Преди да преместите електрическия козметичен стол, извадете захранващия кабел, за да не се заклеши между някои части на стола.
4. Ако захранващият кабел е повреден, незабавно го изключете, не използвайте стола и се обърнете към оторизиран сервизен център. Използвайте само оригиналния захранващ кабел.
5. Не позволявайте на лице, което не извършва лечение, да управлява дистанционното управление.
6. Не поставяйте никакви предмети под стола.
7. Уверете се, че около стола има достатъчно свободно пространство, така че да може да се сгъва и разгъва свободно.
8. Уверете се, че около седалката няма остри или опасни предмети, които биха могли да повредят устройството.
9. Не модифицирайте устройството сами. Ако столът не работи правилно, спрете да го използвате и се обърнете към оторизиран сервизен център.

Използване на устройството:

1. Свържете захранващия кабел към външното захранване 110V~240V.


Метод на инсталиране на подлакътника: За да инсталирате подлакътника, използвайте подлакътника:

Седалката трябва да е в хоризонтално положение, за да монтирате подлакътниците към нея. Плъзнете подлакътника в отвора, разположен отстрани на облегалката. Подлакътникът трябва да е здраво закрепен. Завъртете го надясно или наляво, за да влезе правилно на мястото си. Направете същото и с другия подлакътник.


Подлакътникът е перпендикулярен на земята (независимо от ъгъла на седалката). Той може да се завърти на 180°.




2. Функция за ръчно управление (височина на повдигане: леглото е на 58~ 82 см от земята).

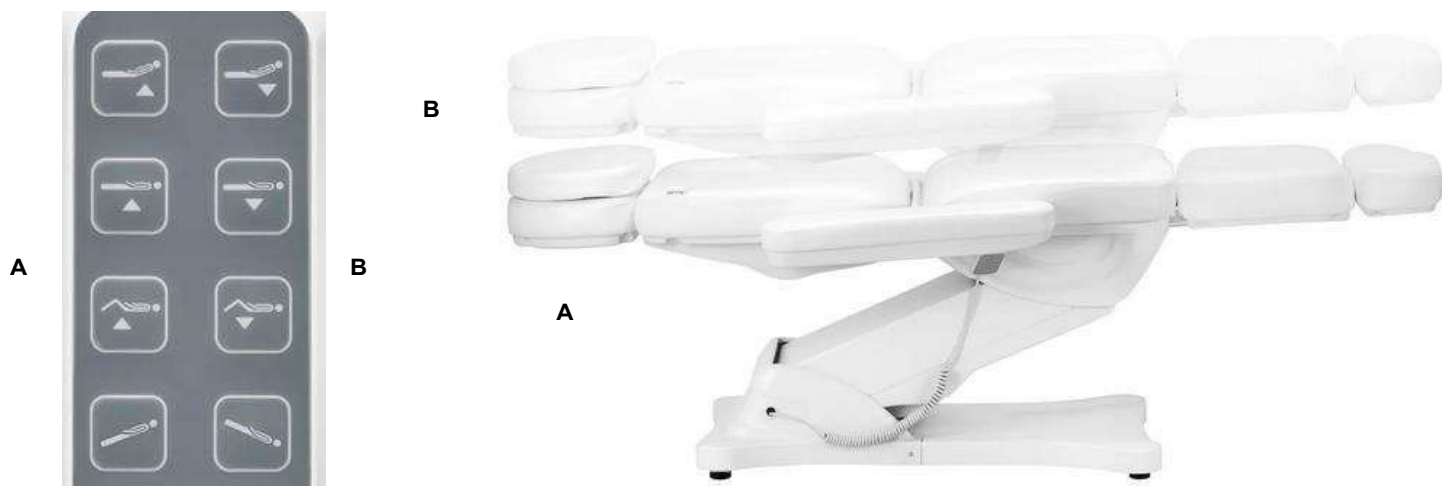

3. Функция за ръчно управление (ъгъл на повдигане на гърба 0-80°, ъгъл на повдигане на краката 0-90°)

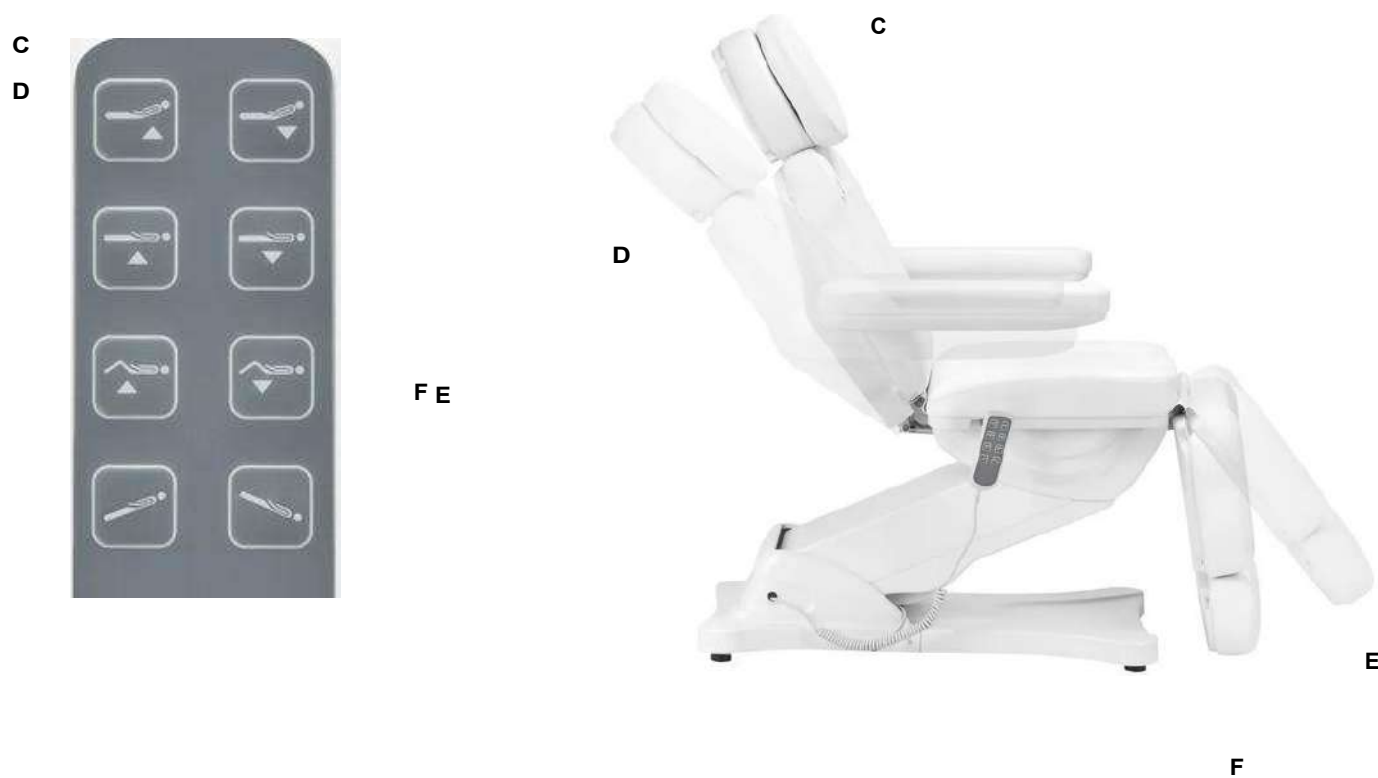

4. Функция за прибиране на подложката за крака (подложка за крака, дължина: 0~ 12 cm)

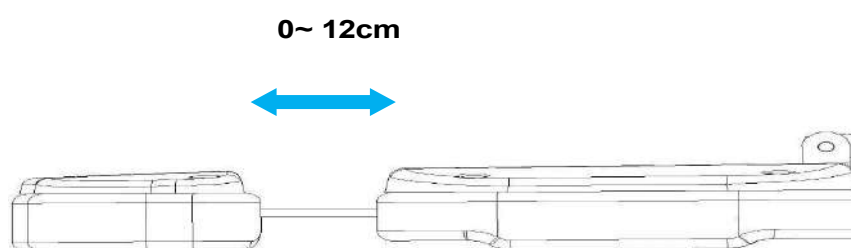

5. Функция "люлка" (седалката на стола може да бъде наклонена под ъгъл - т.нар. люлка. Когато облегалката се спусне и поставката за крака се вдигне, се получава равна повърхност.



G

H



G

H

Почистване и дезинфекция на уреда:

- Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа.
- За да поддържате повърхността на стола в добро състояние, я почиствайте редовно. Не забравяйте да почиствате и дезинфекцирате стола след всяка употреба. Препоръчваме да извършвате цялостна дезинфекция веднъж месечно.

I Метални и пластмасови повърхности

- За да почистите металните и пластмасовите повърхности и уредите за управление, избършете ги с влажна кърпа. За да почистите труднодостъпни места или ъгли, използвайте малка

четка. Не използвайте твърде много течност за почистване на устройството. След това дезинфекцирайте уреда с подходяща течност.

II Повърхности от неръждаема стомана

- Почистването с мек разтвор на почистващ препарат ще бъде най-ефективно. Амонякът и повечето разтворители могат да се използват за отстраняване на силни петна. Избягвайте разтвори на хлорна основа.

III Боядисани или хромирани метални повърхности

- Не използвайте водни струи (душове, оръдия за вода под високо налягане) за почистване.
- Не почиствайте при високи температури и висока влажност, не излагайте уреда на условия, които могат да доведат до замърсяване с течности.
- Не използвайте разтворители или киселини за почистване.
- Избършете равномерно повърхността на стола със специален препарат за почистване на кожа и след това я избършете с чиста, мека кърпа.

IV Повърхност на стола

Поддръжка

Преди поддръжка уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.

- Ремонтите трябва да се извършват от опитен и упълномощен от производителя персонал. Извършването на ремонти от неоторизиран персонал може да доведе до нараняване или повреда на уреда, за които производителят не носи отговорност.
- Използвайте само оригинални резервни части, одобрени от производителя.
- Не използвайте електрическия козметичен стол или аксесоарите, ако те не работят правилно.
- Всички дейности по поддръжката и ремонта трябва да се документират.

Мерки за поддръжка

Проверявайте органите за управление и тяхното окабеляване веднъж седмично. Проверявайте състоянието и функционирането на следните елементи поне веднъж на всеки шест месеца:

- захранващия кабел и неговото закрепване
- Окабеляване на двигателя
- Контролна кутия и нейното окабеляване
- Закрепени ли са аксесоарите
- Нормално функциониране на заключващата система

Ако откриете някакви дефекти, спрете да използвате оборудването и се обърнете към оторизиран сервизен център. Само опитен или упълномощен персонал може да отваря или сменя задвижващия механизъм/контролния блок.

Ако някоя част от оборудването е повредена, изключете захранващия кабел и спрете да го използвате. След това уведомете сервизната служба.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Методи за решаване
Ръчното управление не реагира	Проверете дали интерфейсът, свързващ линията за ръчно управление, е разхлабен (Проверете дали няма проблем с платката), не забравяйте да отбележите първоначалната позиция на щепсела.
Двигателят не реагира	Променете позицията на щепсела на двигателя

За да смените контролната кутия и да поръчате други резервни части, се свържете със сервизния отдел, опишете проблема, преди да се свържете:

1. Модел

2. Дата на закупуване

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.

2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Ltd.).

3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, на мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не попадат течности.

4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от фирма ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:

(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.

6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.

7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.

9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).

10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на т а б е л к а т а . В противен случай съществува риск от неправилно работа на уреда, повреда или дори изгаряне. **ВНИМАНИЕ:**

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.

2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.

3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и поради това следва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране, както и на "АКТИВESHЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.